

LATEX FREE	Nie je vyrobené z prírodného gumového kaučuku
	Ukazovateľ rozsahu obvodu ramena ako pomôcka pri výbere správnej veľkosti manžety
REF	Referenčné katalógové číslo
	Manžeta Easy Cuff
	Manžeta Intelli Wrap Cuff
	Manžeta Comfort Cuff
	Technológia spoločnosti OMRON Healthcare v Japonsku
	Dátum výroby
	Je potrebné, aby používateľ z dôvodu vlastnej bezpečnosti presne dodržiaval tento návod na použitie.
	Obvod ramena
Dátum výroby výrobku je súčasťou čísla šarže, ktoré je uvedené na produkte a/alebo balení pre predaj: prvé 4 číslice znamenajú rok výroby, ďalšie 2 číslice znamenajú mesiac výroby a posledné 2 číslice znamenajú deň výroby.	


SK

Výrobca 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
Zastúpenie v EÚ 	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANSKO www.omron-healthcare.com
Výrobná prevádzka	OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Čína
Dcérske spoločnosti	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, NEMECKO www.omron-healthcare.com
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCÚZSKO www.omron-healthcare.com
Distribúcia a servis v SR	CELIMED s.r.o. Pri majeri 22, 831 06 Bratislava www.celimed.sk

Vyrobené v Číne

Tento produkt OMRON sa vyrába podľa prísneho systému kvality spoločnosti OMRON Healthcare Co., Ltd., Japonsko.

OMRON

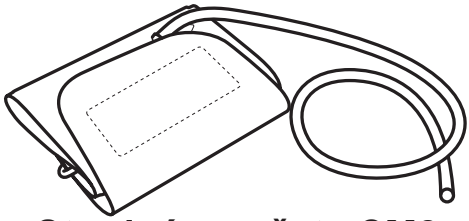

Stredná manžeta CM2

Stredná manžeta

• *Návod na používanie*

2

SK


Dátum vydania: 2022-10-27

All for Healthcare

IM-HEM-CR24-E-SK-07-10/2022

OMRON

Stredná manžeta CM2 (HEM-CR24)

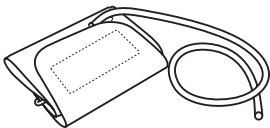


Ďakujeme vám, že ste si kúpili strednú manžetu k meračom krvného tlaku OMRON. Táto manžeta je vhodná pre paže s obvodom 22 až 32 centimetrov. Riadte sa pokynmi návodu, ktorý prináleží k vášmu meraču krvného tlaku.

V záujme vlastnej bezpečnosti presne dodržiavajte nasledujúci návod na používanie. Návod si odložte pre prípad potreby v budúcnosti. Podrobnejšie informácie o svojom krvnom tlaku získate OD SVOJHO LÉKÁRA.

⚠ Upozornenie: Indikuje potenciálne rizikové situácie, ktoré (ak sa im nevyhnete) by mohli mať za následok menšie alebo stredne závažné zranenie používateľa alebo pacienta, prípadne poškodenie zariadenia alebo majetku.

- Táto ramenná manžeta OMRON sa môže pripojiť k rôznym meračom tlaku krvi OMRON. Táto manžeta funguje iba s meračmi tlaku krvi OMRON kompatibilnými so systémom HEM-CR24, ako je uvedené na nálepke na manžete vedľa vzduchového konektora.
- Na svojom aktuálnom produkte si overte, ktorú zátku je potrebné použiť. Použitie nesprávnej zátky môže spôsobiť unikanie vzduchu a nesprávne merania.
- Neperte manžetu ani ju nenamáčajte!

Návod na používanie

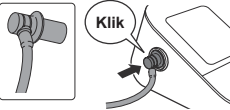


Zasuňte vzduchovú zátku do vzduchového konektora.

Poznámka: Ak používate vzduchovú zátku podľa obrázku naľavo, zaveďte ju do vzduchového konektora až do polohy, kým nezacvakne.



Nasadenie manžety

1. Ľavú ruku si zasuňte do „tunela“ manžety.

Poznámka: Keď nie je manžeta zložená, pretiahnite koniec najviac vzdialený od hadičky cez kovový prstenec tvaru D tak, aby sa vytvoril tunel. Hladká látka má byť na vnútornej strane tunela manžety.

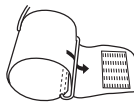

2.

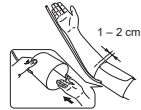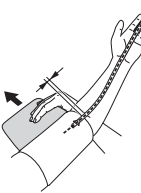

2. Správne si napoložte ruku a rameno.
- Vzduchová hadička sa má vinúť po vnútornej strane predlaktia v osi prostredníka.
 - Spodná časť manžety by mala byť približne 1 až 2 cm nad lakťom.
 - Nasajte manžetu na rameno tak, aby bola značka (šípka pod hadičkou) v strede vnútornej časti hornej končatiny a smerovala nadol po vnútornej strane.

Meranie na pravej ruke

Manžetu nasadte tak, aby bola vzduchová hadička pri lakti.

- Dávajte pozor, aby ste si nepoložili ruku na vzduchovú hadičku alebo inak neobmedzili prúdenie vzduchu do manžety.
- Manžeta má byť 1 až 2 cm nad lakťom.

3. Keď manžetu správne nasadíte, DÔKLADNE zaistíte suchý zips.

- Nedávajte manžetu cez hrubé oblečenie a nevyhŕňajte si rukáv, ak je príliš tesný.
- Manžetu nasadte do úrovne srdca (vo výške prs). Ak je potrebné, použite podhlavník alebo inú podložku.

- Ramennú manžetu čistite mäkkou a suchou handričkou alebo mäkkou a navlhčenou handričkou a neutrálnym mydlom.
- Na čistenie manžety nepoužívajte benzín, riedidlá ani podobné prípravky.
- Manžetu nekladte na miesta s extrémnymi teplotami, vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, prachom alebo výparmi spôsobujúcimi koróziu.
- Vzduchovú hadičku nadmerne neohýbajte ani nezalamujte.

Tipy

Údržba



V prípade vážnej nehody pri používaní tohto zariadenia kontaktujte jeho výrobcu a príslušný úrad členskej krajiny, v ktorej sídlite.

Špecifikácie:

Opis produktu	Manžeta k meraču krvného tlaku OMRON
Model (kódové označenie)	Stredná manžeta CM2 (HEM-CR24-E)
Obvod ramena	22 až 32 cm
Rozmery manžety	Približne 146 mm × 446 mm
Rozpätie tlaku v manžete	Tlak: 0 mmHg až 299 mmHg
Presnosť	Tlak: ±3 mmHg
Klasifikácia	Trieda I
Prevádzkové podmienky	+10 až +40 °C (50 až 104 °F) 15 až 90 % RV (nekondenzujúca) 700 až 1 060 hPa
Skladovacie/Prepravné podmienky	-20 až +60 °C (-4 až 140 °F) 10 až 95 % RV (nekondenzujúca) 700 až 1 060 hPa
Ďalšie súčasti výbavy	Manžeta, návod na použitie, vzduchové zátky
Obdobie trvanlivosti (Životnosť), záruka	5 rokov

Opis symbolov	
	Označenie CE
	Označenie UKCA (hodnotenie súladu vo Veľkej Británii)
	Číslo šarže
	Unikátny identifikátor pomôcky (UDI)
	Zdravotnícka pomôcka
	Teplotné obmedzenie
	Vlhkostné obmedzenie
	Obmedzenie atmosférického tlaku
	Identifikátor manžiet kompatibilných so zariadením
	Ukazovateľ polohy manžety pre ľavé rameno
	Ukazovateľ rozsahu a správnej polohy voči brachiálnej artérii
	Značka na manžete, ktorá má byť umiestnená nad cievou